



EXCOR® アクティブ

キャディーの説明

株式会社 カルディオ

販売名：EXCOR Pediatric 小児用体外設置式補助人工心臓システム
一般的名称：単回使用体外設置式補助人工心臓ポンプ
高度管理医療機器（クラスIV）
特定保守管理医療機器（EXCOR Ikus 補助人工心臓駆動装置）
（EXCOR Active 補助人工心臓駆動装置）
生物由来製品（血液ポンプ）
承認番号：22700BZX00179000

01

スタンド付きキャディ



02

キャスター付きキャディー






このスライドは、Berlin Heart EXCOR® VADシステムとそのコンポーネントの使用に関する詳細な概要を提供することを目的としています。

本プレゼンテーションは、臨床医が各製品に添付されている取扱説明書（IFU）を読み、理解するという責任を免除するものではありません。

また、IFUに記載されている安全上のリスクや注意事項について、患者や保護者に適切な教育を行うことも臨床医の責任です。


EXCOR® ACTIVE スタンド付きキャディ

セットアップ

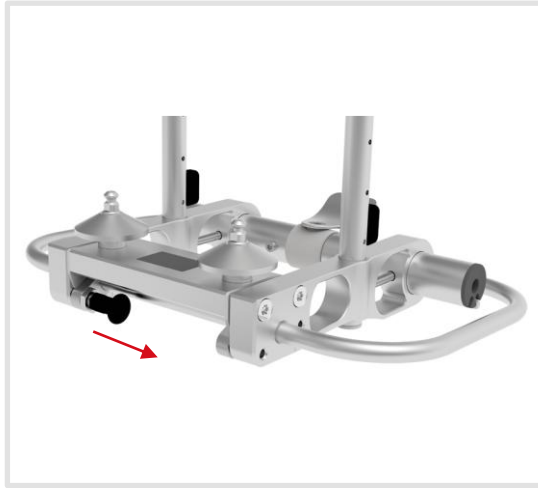

ステップ1

- ロックハンドルを引く

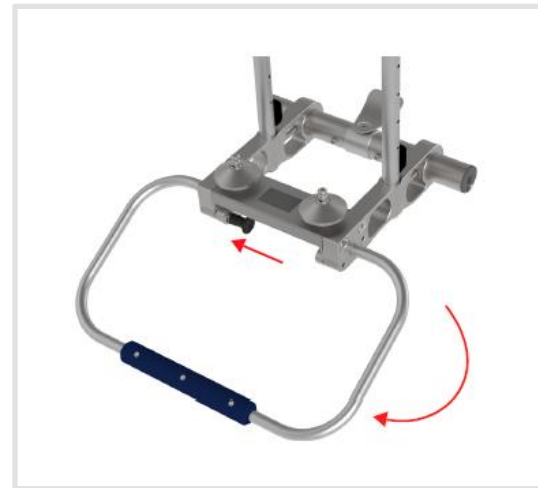


ステップ2

- スタンドを上を広げる
- ロックハンドルを所定の位置にはめ込む



ステップ3

- ホイールハブのマークを点検する
- D3付き 非空気圧式
 - D3なし 空気入りタイヤ

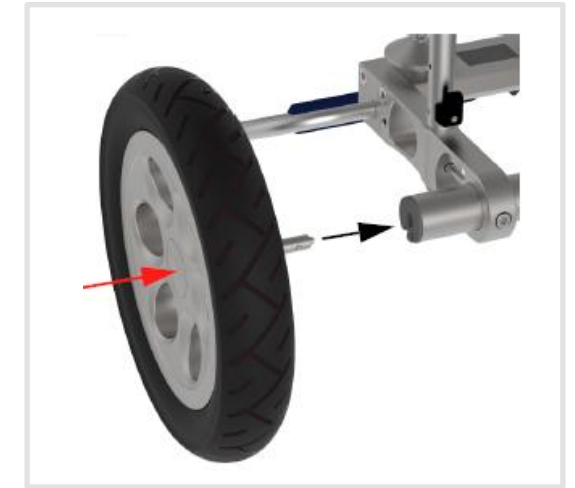

ステップ4

- ホイールロック機構を内側に押す
- 加工中のホイールを取り付ける
- 取り付け後、しっかりと固定されているか確認する



キャディには、空気入りタイヤと空気入りでないタイヤのいずれかを使用することができる。
キャディーに元々付属しているタイプのホイールのみを使用すること。



EXCOR[®] ACTIVE スタンド付きキャディ

セットアップ



ステップ5

- 小物入れのファスナが開くように持ち手を持つ



ステップ6

- アクセサリーバッグをクロスバーに取り付ける
- 下側のアイレットをフックに導く - ハンドルを外す




ステップ7

- ドライビング・ユニットをフック (1) に取り付け、底を (2) に固定する。
- 駆動部ハンドルをはなす


EXCOR® ACTIVE スタンド付きキャディ

セットアップ

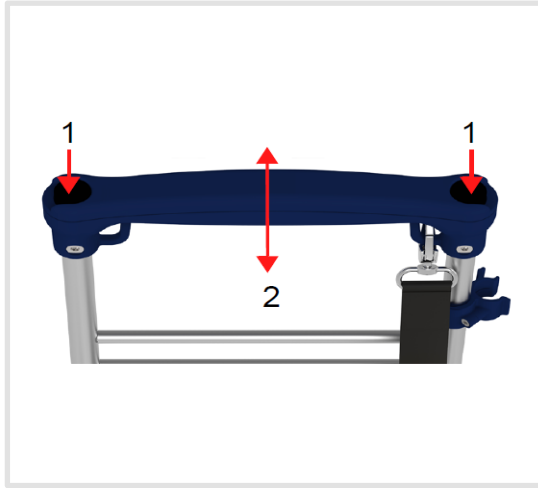


ステップ8

- 両側のロックリリースを押し続ける (1)
- ハンドルを好みの高さまでスライドさせる。

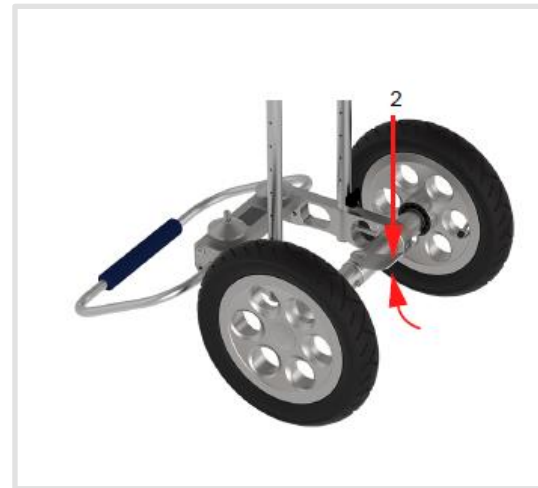

ステップ9

- ロックする:
- レバーを足で押し下げる
- 解除する:
- レバーを足で上げる

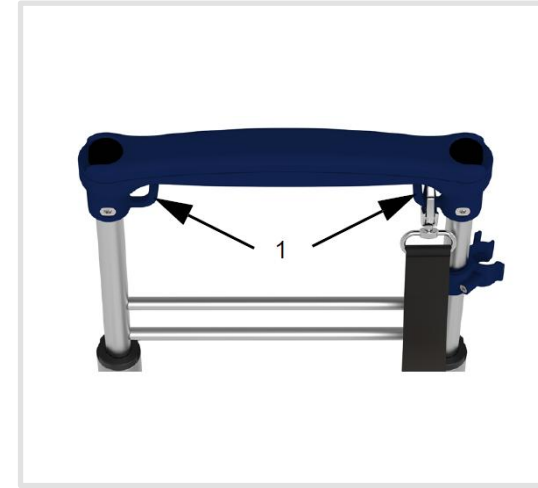

ステップ10


- 固定:
- 保持ストラップを右または左のグロメット(環状の金具)に取り付ける
 - ハンドストラップのサイズを調整する



ステップ11

- ドライビング・チューブをクリップに押し込む

EXCOR® ACTIVE キャスター付きキャディ

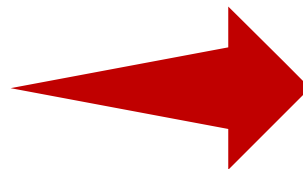

EXCOR® ACTIVE キャスター付きキャディ

スタンド付きキャディからキャスター付きキャディへの再装着





ベルリン・ハート社

Wiesenweg 10
12247 ベルリン

www.berlinheart.de

著者 Franziska Gräbner

CE 0123

